





I hate getting wet with rain outside. A humid room gets tired. Still, the steam in the bathroom and the dripping water warm me up and make me comfortable.

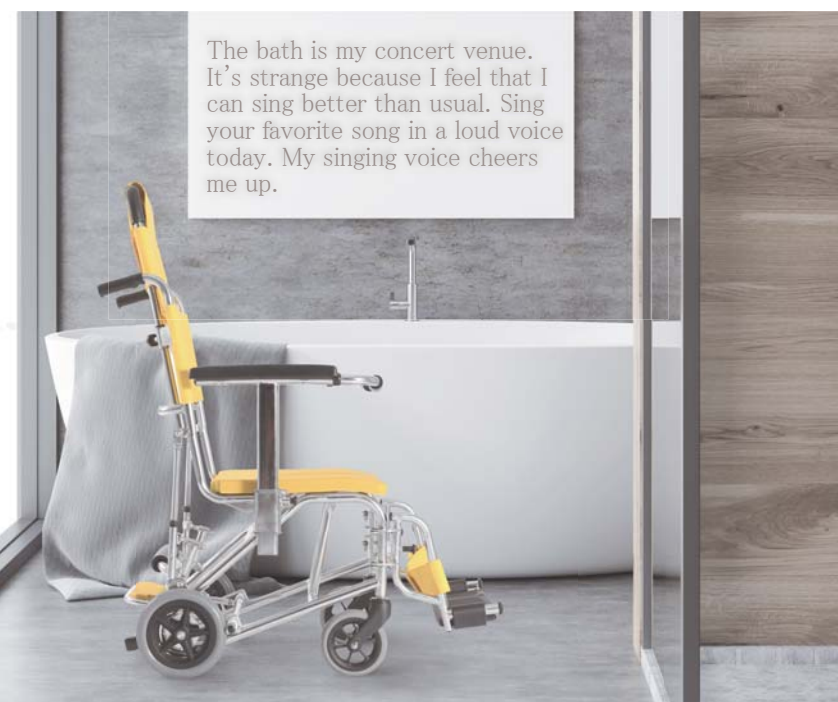

The bath is my concert venue. It's strange because I feel that I can sing better than usual. Sing your favorite song in a loud voice today. My singing voice cheers me up.

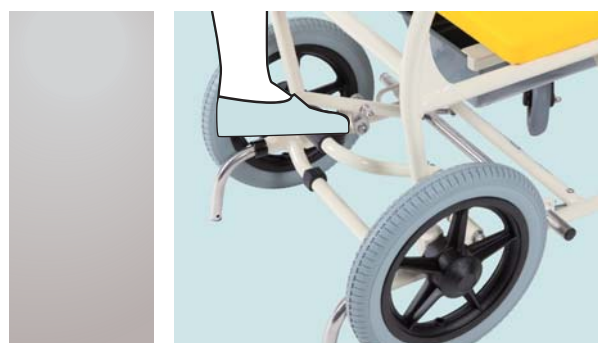

**浴そう対応** **ステンレスフレーム**

対応機種 ▶ KS2・KS3・KS4

浴そうに入れてご使用になる場合は、ご注文の際にお申し付けください。

別売 **KS用 座面下バケツ**  
 ¥968 (税込)


取付可能機種 ▶ KS3・KS4

○シート下にバケツ取付用のレールがあります。  
 ○後ろからスライドして出し入れできます。  
 ※レールはテーパー状になっているので前方にはずれ落ちません。

ご注文の際ご指定ください。 ●仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

対応機種 ▶ KS2・KS3・KS4・KS7・KS10・KSC-1/ST・KSC-2/ST


**2 color** イエロー or レッド よりお選びいただけます。  
 ※標準はクリありとなります。  
 ※クリなしシート変更の場合(¥13,200増税込)となります。(KS10除く)

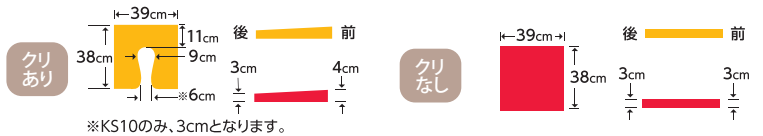

シート 滑りにくい やわらか素材。 材質EVA(独立発泡) <寸法・厚み共通>


対応機種 ▶ KS11-PF/ST

**1 color** イエロー のみとなります。  
 ※座シートはクリありのみとなります。

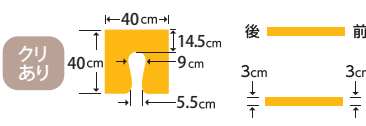

対応機種 ▶ KS12

**2 color** イエロー or グリーン よりお選びいただけます。  
 ※座シートはクリありのみとなります。

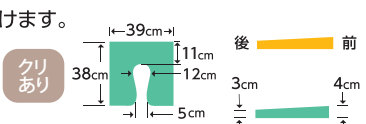

**カワムラサイクル**

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1  
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3  
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11  
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1  
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3  
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723

代理店

**KS series**

シャワー用車いす

**カワムラサイクル**

病院施設

段差の乗り越えがしやすい車輪14インチ




- 落下込み式アームサポート
- 前後スライド式フットサポート
- 足踏み式ブレーキ
- <出荷時同梱> 転倒防止バー
- EVA発泡（ノーパンク）

2 color



車輪14インチ×キャスト7インチ (14.2kg)  
KS2 <クリアシート>

参考価格 ¥116,380 税込

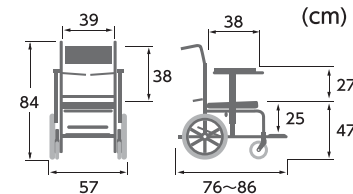

\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

病院施設

カラダもシートも洗いやすい




- 落下込み式アームサポート
- スイングアウト式フットサポート
- 足踏み式ブレーキ
- ハイポリマー(堅動)タイヤ（ノーパンク）
- 転倒防止バー

2 color

車輪12インチ×キャスト5インチ (14.8kg)  
KS12 <クリアシート>

参考価格 ¥133,100 税込

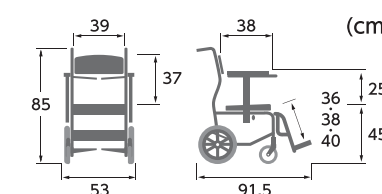

\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

**ウェーブフレーム**  
背中からお尻にかけて洗しやすいウェーブフレーム。カラダとの空間が広く、後ろからも横からも手が入りやすいフレーム構成です。

**シートの取り外しが可能**  
いつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。

着脱シートレバー

家庭在宅介護

シートの高さを3段階で調節可能




- 跳ね上げ式アームサポート
- スイングイン・アウト式フットサポート
- 足踏み式ブレーキ
- ウレタン発泡（ノーパンク）
- <出荷時同梱> 転倒防止バー

2 color

車輪8インチ×キャスト6インチ (11.9kg)  
KS10 <クリアシート>

参考価格 ¥149,050 税込

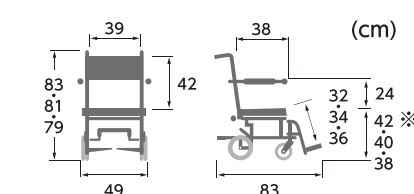

\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

**シート（座面）高さ調節式フレーム**  
ご利用者の体格に合わせて、段階的な調節が可能です。

予めシートの高さをご指定いただけます。  
\*シート高さのご指定がない場合、前座高42cmで出荷いたします。

病院施設

家庭在宅介護

“姿勢保持” ティルト・リクライニングモデル




- ひたりフィット
- 落下込み式アームサポート
- 高さ調節式アームサポート
- スイングアウト式フットサポート
- 足踏み式ブレーキ
- ウレタン発泡（ノーパンク）
- <出荷時同梱> 転倒防止バー

1 color

車輪8インチ×キャスト6インチ (19.6kg)  
KS11-PF/ST <クリアシート>

参考価格 ¥191,400 税込

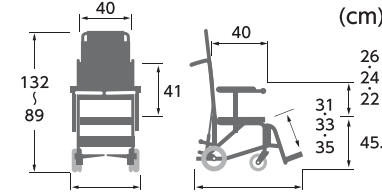

\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

**新リクライニング ひたりフィット機構**  
バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。

ティルト・リクライニング角度  
118° / 100°  
<無段階調整>

家庭在宅介護

ご家庭でも使いやすい全幅49cm




- 落下込み式アームサポート
- 前後スライド式フットサポート
- 足踏み式ブレーキ
- <出荷時同梱> 転倒防止バー
- ハイポリマータイヤ（ノーパンク）

2 color



車輪9インチ×キャスト5インチ (12.6kg)  
KS3 <クリアシート>

参考価格 ¥116,380 税込

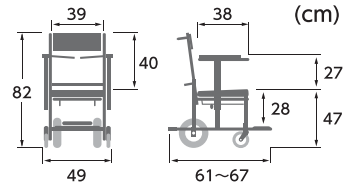

\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

家庭在宅介護

介助しやすい跳ね上げ式アームサポート




- 跳ね上げ式アームサポート
- 折りたたみ式跳ね上げ式フットサポート
- 足踏み式ブレーキ
- <出荷時同梱> 転倒防止バー
- ハイポリマータイヤ（ノーパンク）

2 color

車輪9インチ×キャスト5インチ (11.1kg)  
KS4 <クリアシート>

参考価格 ¥116,380 税込

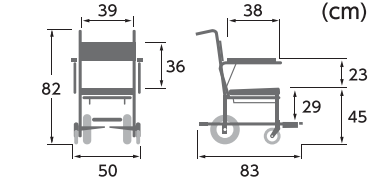

\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

**折りたたみ跳ね上げ式フットサポート**  
フットプレートを折りたたみ収納できます。

家庭在宅介護

軽量&コンパクト 低床モデル




- 跳ね上げ式アームサポート
- 前後スライド式フットサポート
- 転倒防止バー

2 color

キャスト3インチ×キャスト3インチ (9.8kg)  
KSC-1/ST <クリアシート>


参考価格 ¥74,800 税込

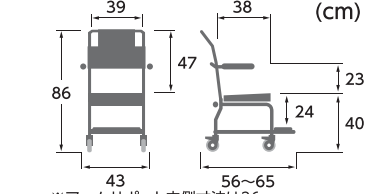

\*アームサポート内側寸法は36cm  
\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

キャスト3インチ×前輪8インチ (10.0kg)  
KSC-2/ST <クリアシート>

参考価格 ¥74,800 税込

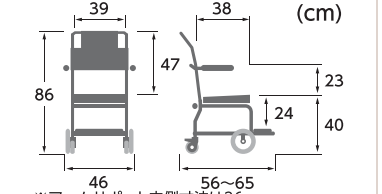

\*アームサポート内側寸法は36cm  
\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

病院施設

家庭在宅介護

自走用標準車いす仕様で折りたたみ可能

※受注生産となります。




- ハイポリマー(堅動)タイヤ（ノーパンク）
- <出荷時同梱> 転倒防止バー
- 着脱式フットサポート

2 color

車輪22インチ×キャスト6インチ (13.5kg)  
KS7 <クリアシート>

参考価格 ¥147,950 税込

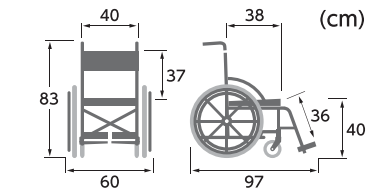

\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

**着脱式フットサポート**  
コンパクトになります。