

モダンリッチスタイル

# Modern Rich-style

モダンシリーズから  
新しいテイルト&リクライニングタイプが登場



Modern  
series  
モダンシリーズ

NEW **KMD-R12**




参考価格  
**¥300,000** 非課税



介助用 **12**車輪 **6**キャスト  
インチ×6インチ

高床 28kg

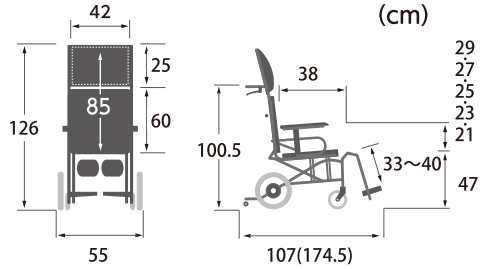

(折りたたみ時)全幅35×全高83×全長90  
( )内、最長時寸法  
\*手押しハンドル高さ、全高、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。  
\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

**ティルト時**  
シート調整角度:5~20°  
<無段階調整>

**リクライニング時**  
バックサポート調整角度:95~145°  
<無段階調整>

**1** Color  
No.82  
チャコールグレー(ポリエステル)

**KMD-R12の特長**



**スラリク機構**



**新ティルト&リクライニング機構**  
バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返しても背中がズレにくく、安定した座位が保てます。



**リクライニング時も身体が安定**  
リクライニング動作に伴い、ランバー角度も可変。

国内特許申請中

**リムビーズ**

国内特許申請中



背クッション裏のベルトに挟み込むだけの簡単装着。

ポケット状のベルトに装着するだけで中材のストロープビーズが優しくホールド。装着する位置や方法で背クッションが立体的な形状に変化します。座っている状態でも微調整が可能。また、通気性も良く、手洗い可能。



**足ズレ抑制のエレベーター式フット・レッグサポート**



自然な脚の軌道を描く新しいエレベーター式機構。しっかりと適切な状態で脚を支えることで、長時間座っていても疲れにくくなります。

**クリックブレーキ**



“踏んで”ブレーキ、“踏んで”解除。リクライニング状態や前方からの操作もラクラク。

**カワムラサイクル**

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1  
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3  
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11  
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1  
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3  
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723

代理店